

ANALYSEUR DE TEXTURES

TEX'AN TOUCH

Analyseur de Texture avec écran tactile Couleur 7"




PARCE QUE LA TEXTURE DÉPEND DE LA TEMPÉRATURE, LE TEX'AN TOUCH VOUS DONNE DES RÉSULTATS PRÉCIS ET FIABLES GRÂCE À SA SONDE PT100

L'ÉCRAN TACTILE 7" DU TEX'AN TOUCH VOUS OFFRE UNE VISUALISATION PARFAITE ET INSTANTANÉE DES COURBES DE VOS TESTS SENSORIELS.

LE TEX'AN TOUCH EST IDÉAL POUR VOS PRODUITS CONSISTANTS, ÉLASTIQUES OU COLLANTS. DIFFÉRENTS MODES OPÉRATOIRES SONT À VOTRE DISPOSITION :


- COMPRESSION,
- TRACTION,
- RELAXATION,
- CYCLE TPA.

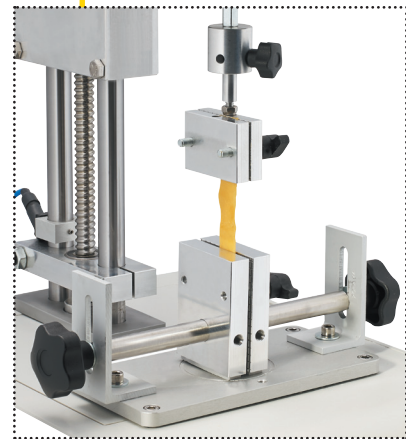

ANALYSEUR DE TEXTURES

CHOISISSEZ LA SONDE LA MIEUX ADAPTÉE À VOS PRODUITS ET À VOS TESTS

Consultez-nous pour définir la forme, le matériau et la dimension des sondes à utiliser sur votre TEX'AN TOUCH. Nous proposons un large choix de solutions répondant aux normes (ex : Test de Bloom), ou méthodes internes déjà existantes.

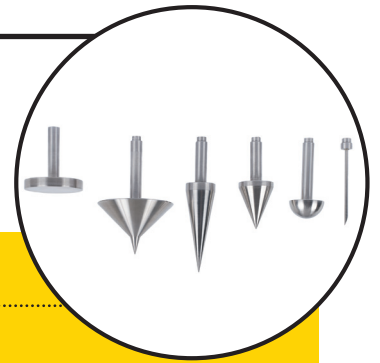

SPÉCIFICATIONS

TYPE D'INSTRUMENT	Analyseur de Texture fonctionnant en Compression et Traction
CHOIX DE CAPTEURS	20 N (2 kg), Résolution 0,008 N (0,8 g) 50 N (5 kg), Résolution 0,02 N (2 g) 200 N (20 kg), Résolution 0,08 N (8 g) 500 N (50 kg), Résolution 0,20 N (20 g)
PRÉCISION	+/- 0,05 % de la pleine échelle
PLAGE DE VITESSE	De 0,1 à 10 mm/s +/-0,2 %
DÉPLACEMENT	Course : 200 mm / Résolution : 0.05 mm
TEMPÉRATURE	Le TEX'AN TOUCH dispose d'une sonde Pt100 afin de mesurer la température de votre échantillon de -20 à 120 °C
AFFICHAGE	Écran tactile 7"
PARAMÈTRES D'AFFICHAGE	Force - Vitesse - Distance - Température - Temps - Sonde de mesure - Échelle de sensibilité - Date/heure - Choix des unités de force : gramme ou Newton - Langue : Français/Anglais
SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ	Une fonction « opérateur » vous permet de renseigner le nom de l'utilisateur de votre instrument. Cet utilisateur devra s'identifier avec un code à 4 chiffres. Vous disposez également d'un mode protégé qui verrouille vos conditions de mesure.
TENSION D'ALIMENTATION	90-240 VAC 50/60 Hz
CONNEXIONS PC	Port RS232 et USB
CONNEXION IMPRIMANTE	Port USB HOST
QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?	Plateau rotatif ajustable intégré : diam. 160 mm. Table pour fixation d'inserts : 120 x 220 mm. Modes Opératoires disponibles : Compression - Relaxation - Traction - Cycle TPA - Pénétrométrie et avec mode compression relative également. Grand choix de sondes disponible, et réalisation de sondes sur mesure avec choix du matériau, de la forme et des dimensions selon vos critères. Le TEX'AN TOUCH dispose d'un large écran tactile 7" couleur qui permet une utilisation confortable et une visualisation des mesures optimale. Mémorisation de vos méthodes de mesure. Sauvegarde des données et exportation à l'aide d'une clé USB. Pilotage externe grâce au logiciel TEX'AN DRIVE en option.
DIMENSIONS ET POIDS	L300 x I500 x H600 mm / Poids : 21 kg

SECTEURS D'ACTIVITÉ



AGRO-ALIMENTAIRE



COSMÉTIQUE / PHARMACIE



MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



ENSEIGNEMENT