


VISCOSIMÈTRE

RM 100 TOUCH GEL TIMER

Viscosimètre - Gélo-mètre*

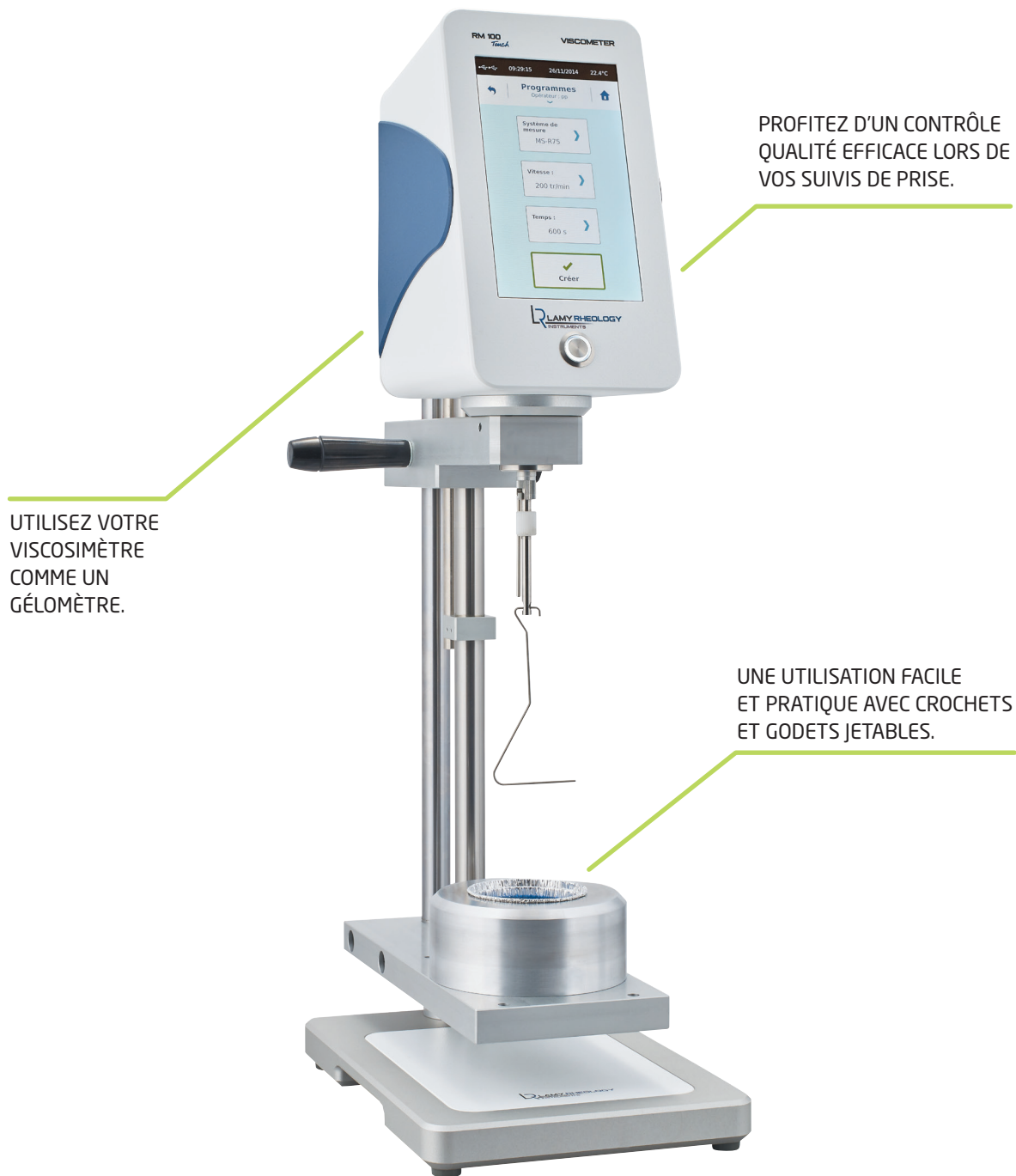

UTILISEZ VOTRE
VISCOSIMÈTRE
COMME UN
GÉLOMÈTRE.

PROFITEZ D'UN CONTRÔLE
QUALITÉ EFFICACE LORS DE
VOS SUIVIS DE PRISE.


UNE UTILISATION FACILE
ET PRATIQUE AVEC CROCHETS
ET GODETS JETABLES.

* Également disponible en version thermostatée T° ambiante à 200°C.

VISCOSIMÈTRE

DÉTERMINEZ LES TEMPS DE GEL DE VOS RÉSINES ET PRODUITS ÉVOLUTIFS

Le RM 100 TOUCH GEL TIMER est idéal pour suivre l'évolution de la viscosité de votre produit jusqu'à l'état solide.

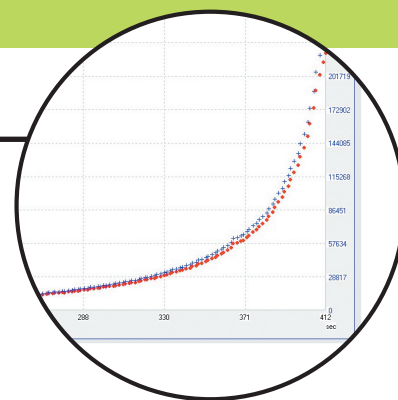

SPÉCIFICATIONS

TYPE D'INSTRUMENT

Viscosimètre/Géломètre rotatif à mobile tournant

VITESSE DE ROTATION

Nombre de vitesses illimitées entre 0,3 et 1500 tr/min

PLAGE DE COUPLE

De 0,05 à 40 mNm

TEMPÉRATURE

Le RM 100 TOUCH GEL TIMER est équipé d'une sonde PT100 qui indique la température de -50 °C à + 300 °C.

PRÉCISION

+/- 1 % de la pleine échelle

RÉPÉTABILITÉ

+/- 0,2 %

PLAGE DE VISCOSITÉ

100 - 5 000 000 000 mPa.s selon la vitesse utilisée.

AFFICHAGE

Écran tactile 7"

PARAMÈTRES D'AFFICHAGE :

Viscosité - Vitesse - Couple - Température - Temps - Géométrie de mesure - Échelle de sensibilité - Date/heure - Choix des unités de viscosité : cP ou mPa.s - Langue : Français/Anglais

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Une fonction « opérateur » vous permet de renseigner le nom de l'utilisateur de votre instrument. Cet utilisateur devra s'identifier avec un code à 4 chiffres. Vous disposez également d'un mode protégé qui verrouille vos conditions de mesure.

TENSION D'ALIMENTATION

90-240 VAC 50/60 Hz

SORTIE ANALOGIQUE

4 - 20 mA

Plage de couple à définir par l'utilisateur

CONNEXIONS PC

Port RS232 et USB

CONNEXION IMPRIMANTE

Port USB HOST

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?

Profitez du Pilotage externe de votre RM 100 TOUCH GEL TIMER grâce au logiciel VISCO RM INCLUS. Utilisation de godets jetables.

MALLETTE DE TRANSPORT

En option pour la tête de mesure uniquement

DIMENSIONS ET POIDS

Tête : L180 x l135 x H250 mm / Support du GEL TIMER : L280 x l200 x H630 mm / Poids : 15 kg

SECTEURS D'ACTIVITÉ



PEINTURES / ENCRE / REVÊTEMENTS



CHIMIE / PRODUITS PÉTROLIERS



MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



AGRO-ALIMENTAIRE

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

- Godets jetables en aluminium (lot de 100) - Réf. 700010



- Crochets gel timer de mesure fil inox 316l (lot de 100) Réf. 700011

